




Rigid Ankle Supports

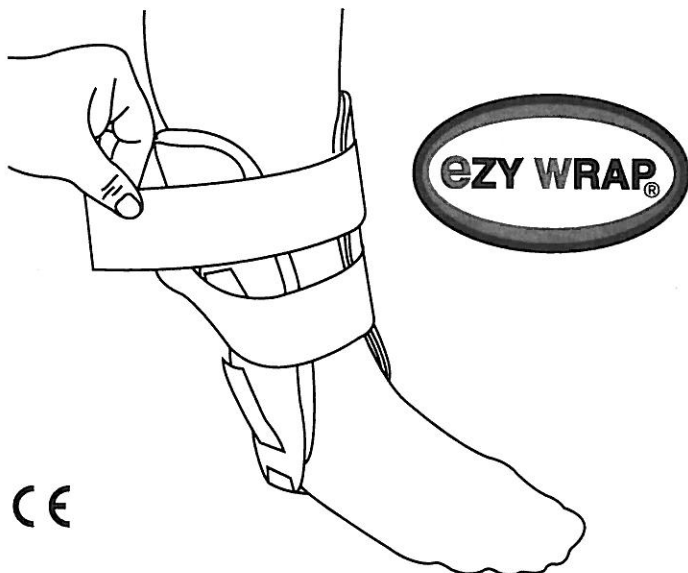


INDICATIONS

Traitement fonctionnel des traumatismes de la cheville.


Lire attentivement les informations suivantes avant utilisation.
Cet article requiert une utilisation convenable.

Caractéristiques uniques:


Tubulure souple pour gonfler la poche d'air, avec dispositif de pincement pour scellement.

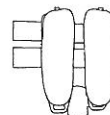

Poche d'air

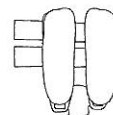

Tampon en mousse à mémoire Memory Foam®

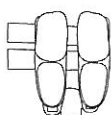

Poche d'air/de gel

- A Placer le pied du patient dans le support de talon :**
Centrer le support de talon en mousse Volara sous le talon en répartissant le matériau de manière uniforme (Figure 1).

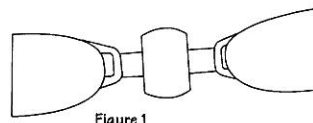


Figure 1

- B Attacher la lanière inférieure en Velcro® :**
Enrouler d'abord la lanière de fermeture inférieure en Velcro® pour assurer un bon alignement (Figure 2).

- C Attacher la lanière supérieure en Velcro® :**
Enrouler ensuite la lanière supérieure en Velcro® en l'attachant au crochet en Velcro®. Ajuster l'ensemble pour assurer le confort du patient. Vérifier que les coquilles latérales sont bien centrées sur la cheville et la jambe (Figure 3).

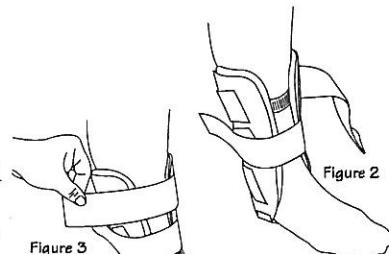


Figure 2

Figure 3

- D Ajuster les lanières pour que la chaussure épouse bien le pied du patient :**
Presser les côtés de la poche de gel thérapeutique pour répartir uniformément la pression à l'intérieur de la coquille en plastique. Resserrer les lanières inférieure et supérieure de manière à ce qu'elles soient bien ajustées tout en restant confortables (Figure 4).

- E Ajuster les lanières verticales latérales :**
Ajuster les lanières verticales latérales en tirant dessous vers le haut jusqu'à ce que l'ensemble soit bien ajusté (Figure 5).

- F Retrait du système orthopédique de support de cheville :**
Retirer les lanières supérieure et inférieure de fermeture en Velcro®, faire glisser l'appareil orthopédique vers l'arrière de la cheville (Figure 6).

- G Traitement par application de gel froid :**
Retirer la poche de gel thérapeutique du système de support de cheville et la laisser au congélateur pendant 2 heures. Remettre la poche de gel dans le système de support de cheville et suivre les instructions d'ajustement. Le patient doit enfiler une chaussette en tissu absorbant avant de remettre le système de support sur la cheville. Ne pas mettre l'ensemble du système de support de cheville au congélateur. Appliquer le gel sac froid en 20 minutes.

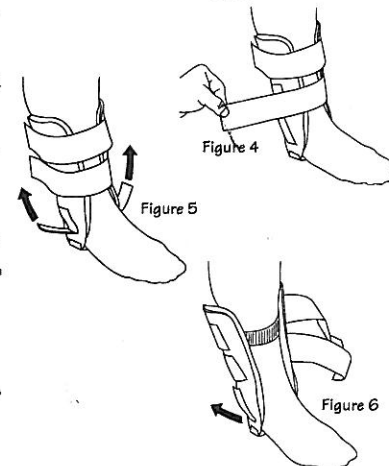


Figure 4

Figure 5

Figure 6

REMARQUE: Si l'un des symptômes suivants se produisent au cours de votre remise en état de consulter votre professionnel de la santé:

- Augmentation de la douleur et l'enflure
- Douleur dans une nouvelle zone de plus de 24 heures
- Augmentation de la difficulté à marcher
- De prise ou de verrouillage de l'articulation
- Incapacité de progresser à travers les exercices
- Impossibilité de marcher à une allure normale dans les 10 à 14 jours

ENTRETIEN

Laver à la main à l'eau froide et au savon doux. Ne pas javelliser. Rincer soigneusement, afin d'éliminer toute trace de détergent qui pourrait provoquer l'irritation de la peau. Laisser sécher à l'air libre. Ne pas tordre. Mettre à plat pour lui redonner sa forme.

AVERTISSEMENT : CONSULTER IMMÉDIATEMENT LE MÉDECIN TRAITANT EN CAS DE DOULEURS, DE GONFLEMENTS, DE MODIFICATIONS DES SENSATIONS OU DE RÉACTIONS INHABITUÉLLES.

LE FABRICANT N'OFFRE AUCUNE GARANTIE QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT EMPÊCHERA TOUTE BLESSURE DE SE PRODUIRE